


Autoclave CLINOCLAV

Clase S (Norma EN-13060)



**Secado con
sistema de vacío**

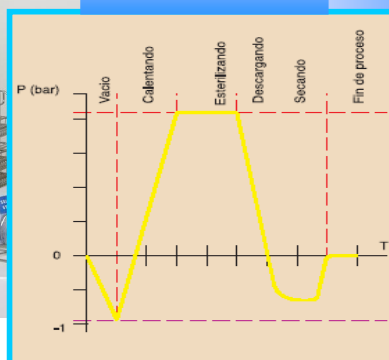

Características

- **Indicado para esterilizar:** material sólido sin embolsar, material sólido embolsado, pequeños elementos porosos, y elementos huecos tipo B (cavidades poco profundas y anchas. Vidrio, plástico, elementos metálicos, bolsas de desecho, etc.
- **No adecuado para esterilizar:** líquidos.
- **Pre-vacío** antes de la esterilización y secado con sistema de vacío.
- Control por microprocesador: temperatura, ciclo y purgado.
- **Seguridad:** válvula y termostato de seguridad, dispositivo anti-apertura de la puerta mientras exista presión en la cámara.
- Depósito de condensados de 2,6 litros y depósito para la alimentación de la autoclave de 6 litros. Llenado automático de la cámara de esterilización con 1,2 litros de agua aproximadamente.
- Cinco programas de esterilización.
- Incorpora conexión **RS-232** para conectar a una impresora.

Autoclaves

Referencia	Código	Capacidad en Litros	Ø x fondo en cm.	Alto/Ancho/fondo exterior en cm.	Temp. °C	Presión Máxima bar.	Consumo W	Peso Kg.	Tiempo de Esterilización
AH-21 S	13250021	21	25 x 41,5	42,5 x 59 x 68	100-135	2,2	2.000	55	3 a 60 min.

Se suministran completos con los accesorios:

Un soporte para 5 bandejas

Tres bandejas perforadas en acero inoxidable
Ref. BAH-21

Una pinza para extraer bandejas

Un tubo flexible con conector para vaciar el depósito de condensados



Accesorios

- **Impresora sobremesa (a través de RS-232)**

Imprime el número de programa, número de ciclo, temperatura, fecha y hora del ciclo.
Los mensajes de error se reflejan en la impresión.
Si el proceso ha sido correcto imprime: Esterilización OK



Ref.: ITS
Código: 90131301

Autoclaves