



Jimeno
suministros de laboratorio

EnSURE[®] Touch

Simplificando la
inocuidad alimentaria



hygiena.com/ensuretouch-fb

Le presentamos EnSURE® Touch

EnSURE® Touch es el sistema de monitoreo ambiental y de ATP de nueva generación. Diseñado para funcionar como un smartphone, le proporciona fácil y rápidamente datos precisos para apoyar su programa de inocuidad alimentaria. EnSURE Touch se adapta a su lugar de trabajo y está diseñado pensando en sus necesidades. EnSURE Touch hace que sus procesos sean más fáciles tanto si cuenta con experiencia en inocuidad alimentaria como si lleva poco tiempo.

Funcionamiento.

EnSURE Touch es un instrumento portátil e inteligente que mide rápidamente la contaminación proveniente de bacterias, patógenos, alimentos, enzimas y microorganismos indicadores. Tras tomar una muestra, el sistema mide la cantidad de trifosfato de adenosina (ATP, que se encuentra en todos los seres vivos o que alguna vez lo fueron) y le proporciona un valor numérico objetivo combinado con una notificación de Pasa/Precaución/Falla.



¿Cómo puede ayudarle?

- Verifique la higiene en 10 segundos
- Mantenga los datos de inocuidad alimentaria en un solo lugar
- Facilite sus auditorías
- Compare la eficacia de los procedimientos de saneamiento
- Demuestre objetivamente el cumplimiento de los estándares
- Comunique el éxito con informes detallados
- Identifique las áreas problemáticas
- Proporcione entrenamiento y retroalimentación in situ
- Cumpla con las normas FSMA, GFSI e ISO
- Proteja la reputación de la marca
- Reduzca el riesgo de intoxicación alimentaria, cierre de fabricas y retiro de productos del mercado
- Reduzca los costes de inocuidad alimentaria mediante la realización de pruebas internas
- Proporcione pruebas en el cumplimiento debido de HACCP
- Optimice procesos y limite el tiempo de paros de línea de producción
- Haga que el monitoreo ambiental sea tan fácil como utilizar un smartphone

Innovación a tu alcance



Prueba rápida

Realice una prueba en solo dos pasos.



Sincronización

Sincronización inalámbrica de datos a SureTrend Cloud.



Planes

Agrupe, programe y aleatorice fácilmente las ubicaciones de las pruebas para garantizar la cobertura del muestreo.



Remuestreo

Vuelva a realizar las pruebas con resultados Falla al instante para demostrar la eficacia de las acciones correctivas.



Ubicaciones

Cree y edite puntos de prueba con campos personalizados y límites de Pasa/Falla sobre la marcha.



Calibración

Verifique la calibración en pocos pasos sin tener que enviarlo al fabricante.



Usuarios

Gestione el acceso con contraseñas y roles de usuario.



Configuración

Personalice la configuración del idioma, descripción y tipos de prueba.



Búsqueda

Rápidamente encuentre la ubicación o plan de prueba que está buscando.



Enzimas

Realice pruebas y obtenga resultados de fosfatasa alcalina y fosfatasa ácida.



Resultados y reportes

Fácilmente realice el análisis de tendencias y reportes de resultados.



MicroSnap®

Realice pruebas y muestre resultados para coliformes, *E. coli*, *Enterobacteriaceae*, y cuenta total.




El AOAC Research Institute, es una de las organizaciones de certificación de productos más reconocidas del mundo, publicó su *Performance Tested Method*™ certificando a los dispositivos de ATP en superficies UltraSnap® para su uso con el EnSURE Touch.

Especificaciones:

Tamaño:	7" x 3" x 1"
Peso:	0.7 lbs
Sensibilidad:	<1 femtomol de ATP
Memoria:	2GB de memoria interna+ almacenamiento ilimitado en la nube
Connectividad:	USB o Wi-Fi
Idioma:	Configuración disponible para varios idiomas
Batería:	Batería recargable de iones de litio con puerto de carga USB-C*

* La duración de la batería varía en función del uso y la configuración

Siempre actualizados Siempre almacenados Siempre encriptados

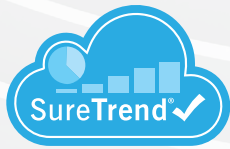


SureTrend Cloud es una plataforma de análisis de datos online fácil de usar que se sincroniza de forma inalámbrica con EnSURE Touch para consolidar e

interpretar los resultados de las pruebas. Permite monitorear y gestionar el acceso a los usuarios a través de múltiples plantas de manufactura, lo que facilita la gestión de riesgos.



Características y beneficios:

- Fácil de usar e intuitivo: no requiere capacitación
- Plataforma basada en la web: no es necesario descargar ningún software
- Reúne múltiples tipos de datos de inocuidad alimentaria en un solo lugar
- Invite a colegas y asigne funciones para aumentar la colaboración, responsabilidad y la participación de su organización, y proporcione una mayor visibilidad de su programa de inocuidad alimentaria
- El panel de control interactivo ofrece una visión general del rendimiento del plan de pruebas
- Los reportes pre cargados ahorran tiempo, con opción a personalizarlos según sean sus requerimientos
- Nuevas funciones añadidas periódicamente a través de actualizaciones de software automáticas, no es necesaria la asistencia del departamento de TI
- Datos y almacenamiento ilimitados: costos iniciales gratuitos
- Gestione fácilmente uno o cientos de instrumentos desde una sola cuenta
- Realice el seguimiento de las pruebas repetidas para descubrir oportunidades de capacitación o identificar el equipamiento que pueda necesitar sustitución

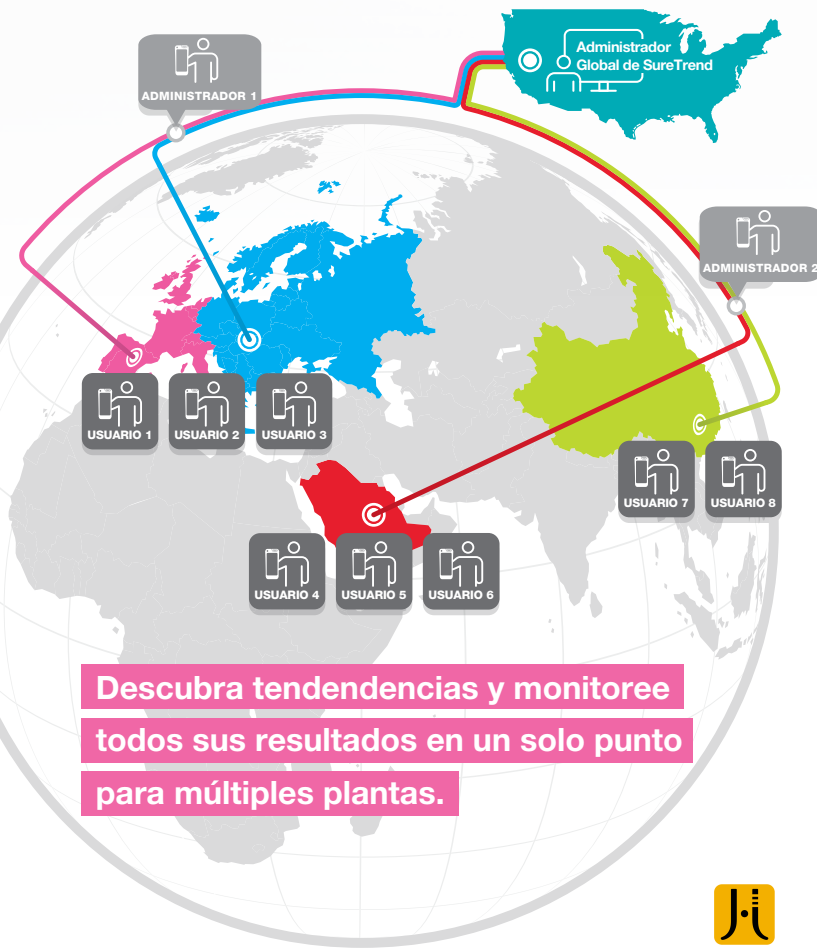

Dispositivos de prueba compatibles

Los dispositivos de prueba Hygiena son increíblemente fáciles de usar. Su diseño maximiza la toma y recuperación de muestras, al mismo tiempo que utilizan la tecnología patentada Snap-Valve para facilitar la activación. Estos dispositivos eliminan los materiales extraños, mejoran la eficiencia, minimizan la variabilidad y reducen los costos.

UltraSnap® | Prueba de ATP en superficies



Núm. de catálogo: US2020 | Cantidad: 100

SuperSnap® | Prueba de ATP de alta sensibilidad en superficies



Núm. de catálogo: SUS3000 | Cantidad: 100
Núm. de catálogo: SUS3000X | Cantidad: 100

AquaSnap® TOTAL | Prueba de ATP en agua



Núm. de catálogo: AQ-100X | Cantidad: 100

AquaSnap® FREE | Prueba de ATP libre en agua



Núm. de catálogo: AQ-100FX | Cantidad: 100

CalCheck | Dispositivo de verificación de calibración LED



Núm. de catálogo: CAL | Cantidad: 1

MicroSnap® | Pruebas de microorganismos indicadores



Núm. de catálogo: MS1-CEC | Cantidad: 100
Núm. de catálogo: MS2-ECOLI | Cantidad: 100
Núm. de catálogo: MS2-COLIFORM | Cantidad: 100
Núm. de catálogo: MS1-TOTAL | Cantidad: 100
Núm. de catálogo: MS2-TOTAL | Cantidad: 100
Núm. de catálogo: MS1-EB | Cantidad: 100
Núm. de catálogo: MS2-EB | Cantidad: 100

ZymoSnap® ALP | Prueba de verificación de pasteurización



Núm. de catálogo: ZS-ALP-100 | Cantidad: 100

CROSS CHECK | Prueba de verificación de eficiencia de cocción



Núm. de catálogo: CX-3000 | Cantidad: 10

EnSURE Touch está calibrado en fábrica y utiliza tecnología avanzada que no requiere recalibración.

CalCheck se utiliza para realizar verificación de calibración internas como parte de un programa de control de calidad, por lo que no es necesario enviar su EnSURE Touch a Hygiena para una verificación de calibración anual.